



*Clear*  
**rainbow CT**  
产品目录

**Dentium 登腾**  
For Dentists By Dentists



## 产品总览

### 1. 超大视野

同类设备中最大FOV 16×18cm(拼接), 适用从种植计划到正畸矫正等各领域。

### 2. 更清晰的影像

低噪点、更清晰的影像, 大大降低前牙伪影, 使诊断更精确。

### 3. 登腾原厂软件

直观的UI设计, 简化的操作界面方便医生使用。



视野(16x18)



全景



侧位



CBCT




3D 视图软件



rainbow 正畸

## 大视野&多视野


宽且清晰的标准视野，无外廓影像，可用于颞下颌关节、耳鼻喉影像。

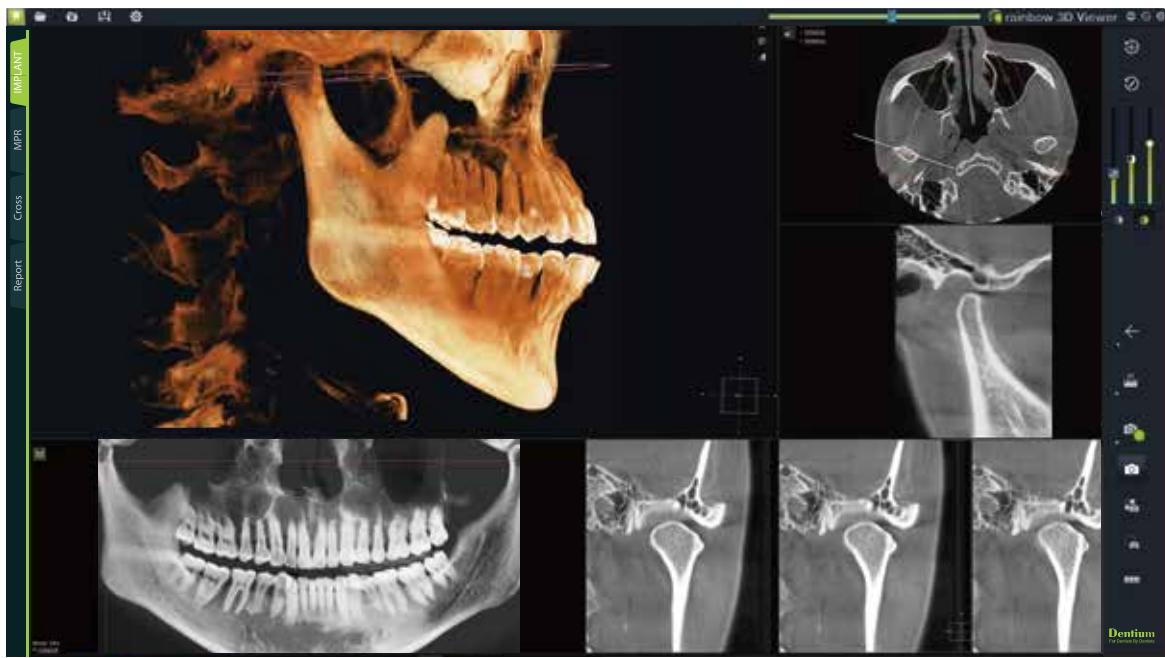

常规拍摄即可用于颞下颌关节诊断 (Fov:16×10cm 标准视野)

## Local (局部)


牙髓诊断模式下，只需极少的射线照射量即可得到清晰的影像进行诊断。

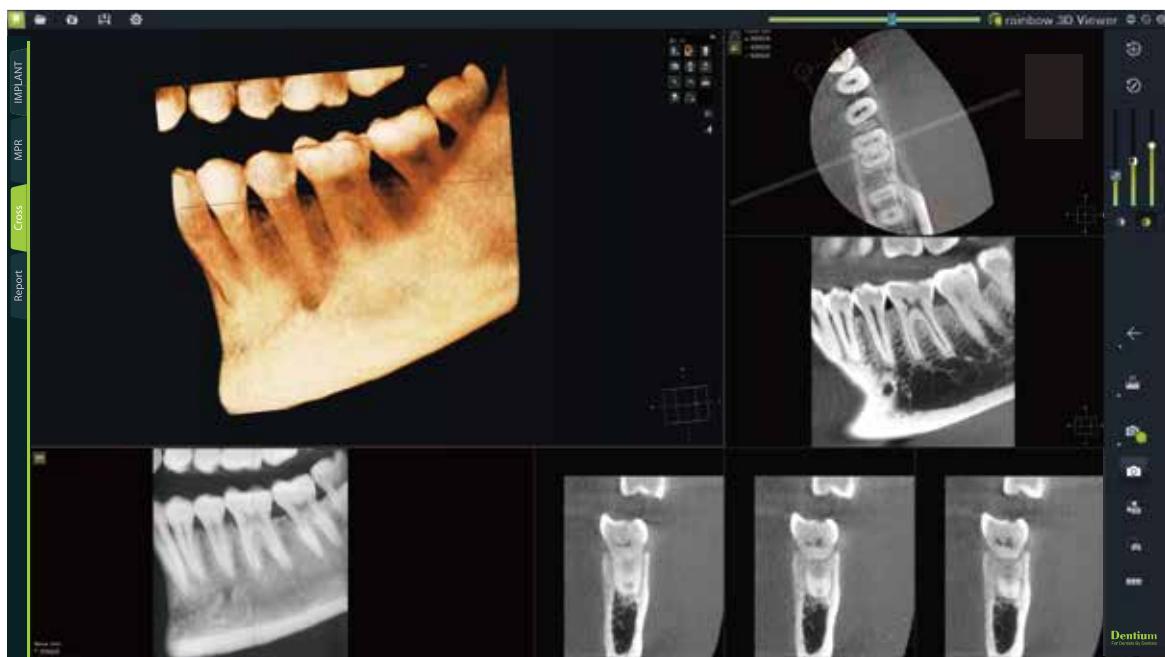

根管治疗时使用 (Fov:5×5cm 局部)


## 影像拼接

针对拍摄的影像无法做出诊断时,可通过该拼接功能将上部及下部进行拼接合成出清晰的影像。该功能在颌面外科及正畸矫正领域应用广泛。

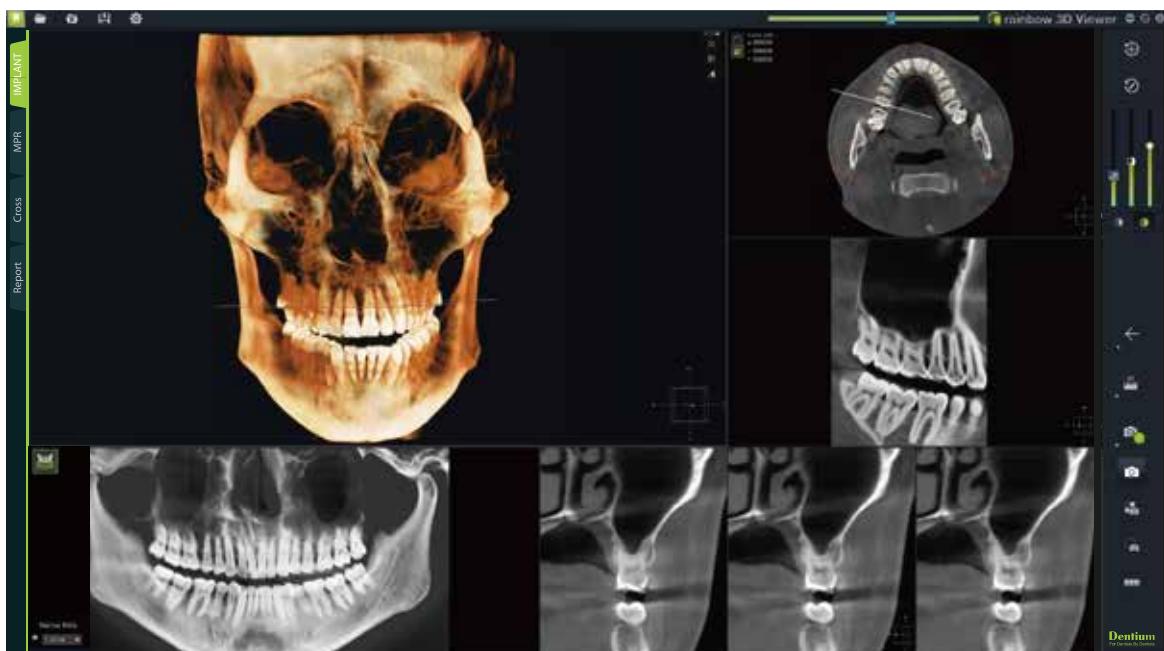


头颈部诊断时适用 (Fov:16×18cm 拼接)

## FOV尺寸比较

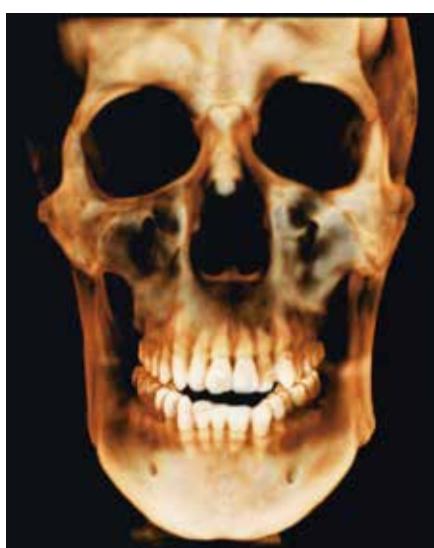

登腾rainbow CT(16×18cm)

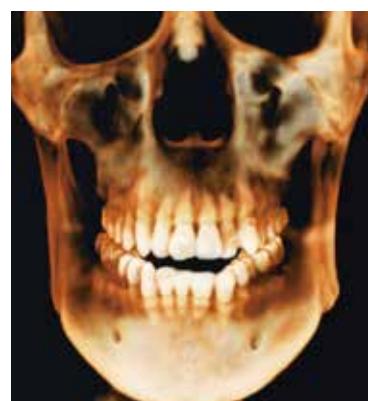


A品牌CT(14×14cm)



B品牌CT(10×8.5cm)

## rainbow 3D Viewer

通过CT拍摄的影像可快速进行诊疗分析,制定种植计划及设计正确的位点、路径及深度。  
两种图像清晰度可选:低剂量模式,适用于整体观察;高清模式,适用于局部高清观察及手术方案规划。

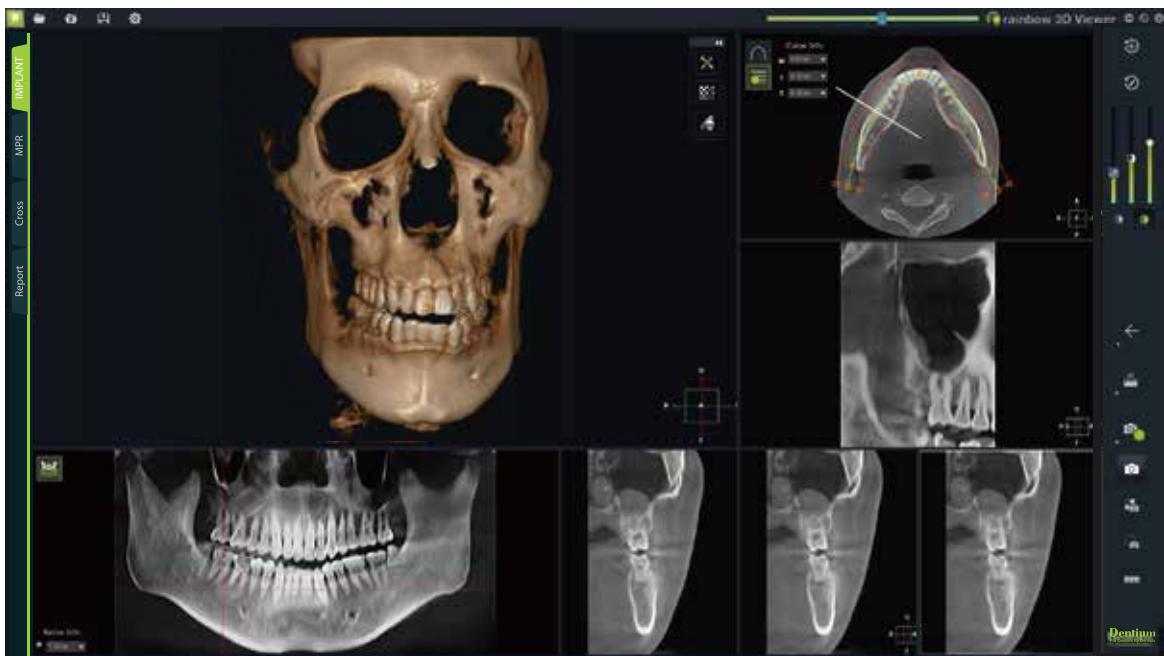

种植体植入前

通过影像中计划植入部位颜色的不同可迅速确认该部位的骨密度。



种植体植入后

## MPR (多平面重建)

大量的多角度影像可同时实现3D还原,水平面、矢状面及冠状面。




多平面重建

## Cross

可设定需要拍摄部位曲线以最小值0.5mm为间隔进行断面观察。

Cross View Section:可在指定区域内一次形成最多81张纵向断层片,利于发现细微病灶点。

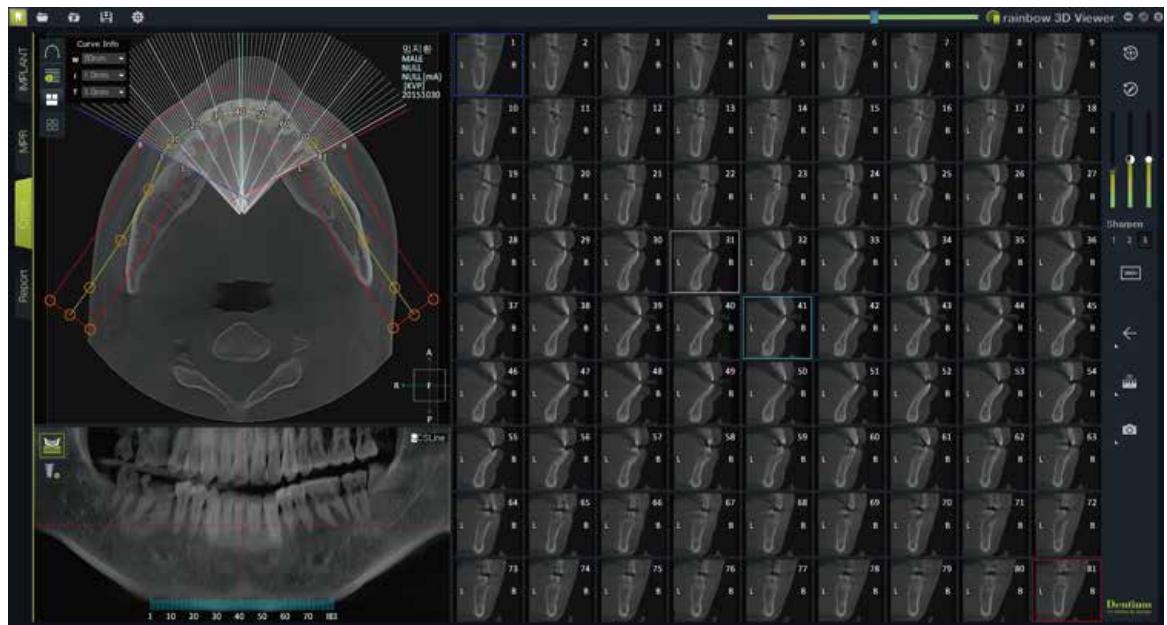

cross影像

## Panorama (全景)

大大降低前牙伪影，使诊断更精确。



## TMJ (颞下颌关节)



打开



关闭




关闭




打开

# 统一的管理软件


通过登腾自主研发的管理软件，可以对全景、standard、CT、头颅侧位等口腔影像进行统一管理。通过该软件可直接或间接与其它设备进行互联，软件直观的界面设计便于医生操作。

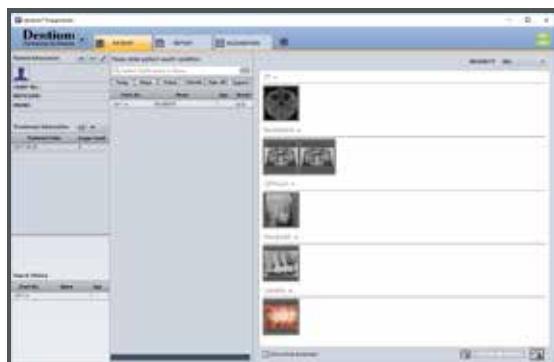


主界面

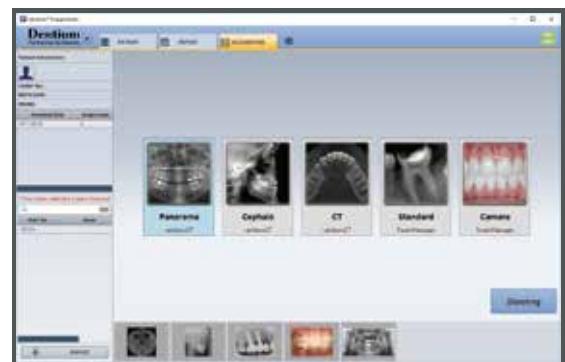


拍摄界面

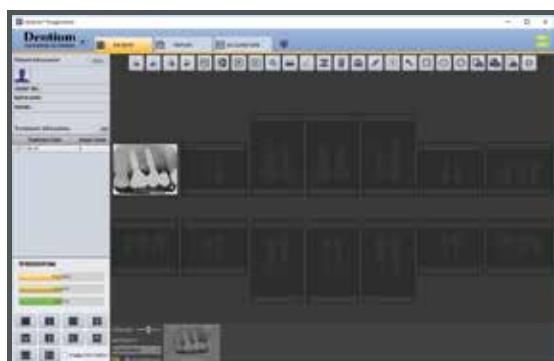


小牙片模式

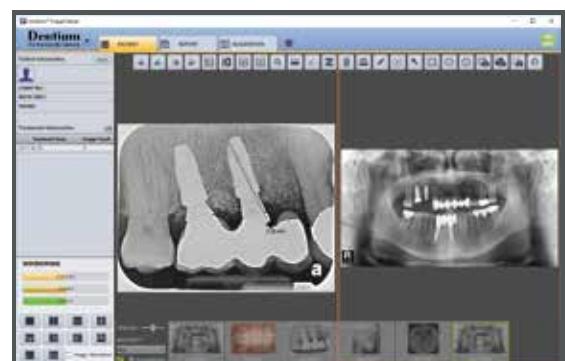

全景模式

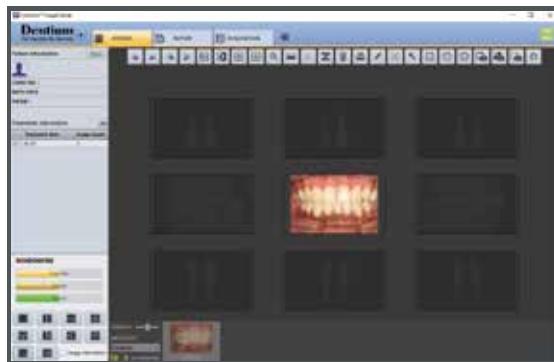


照片模式

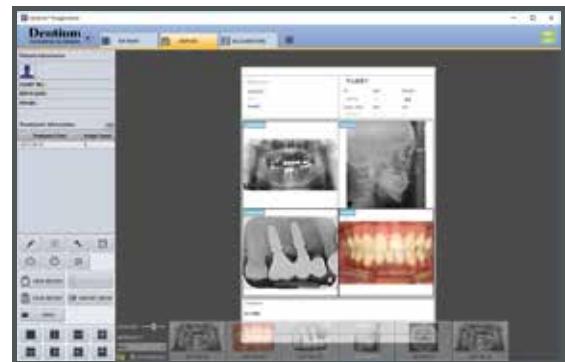

报告生成功能

## 头颅影像诊断

侧位、PA、SMV等多种影像大大提高正畸诊断的准确性。

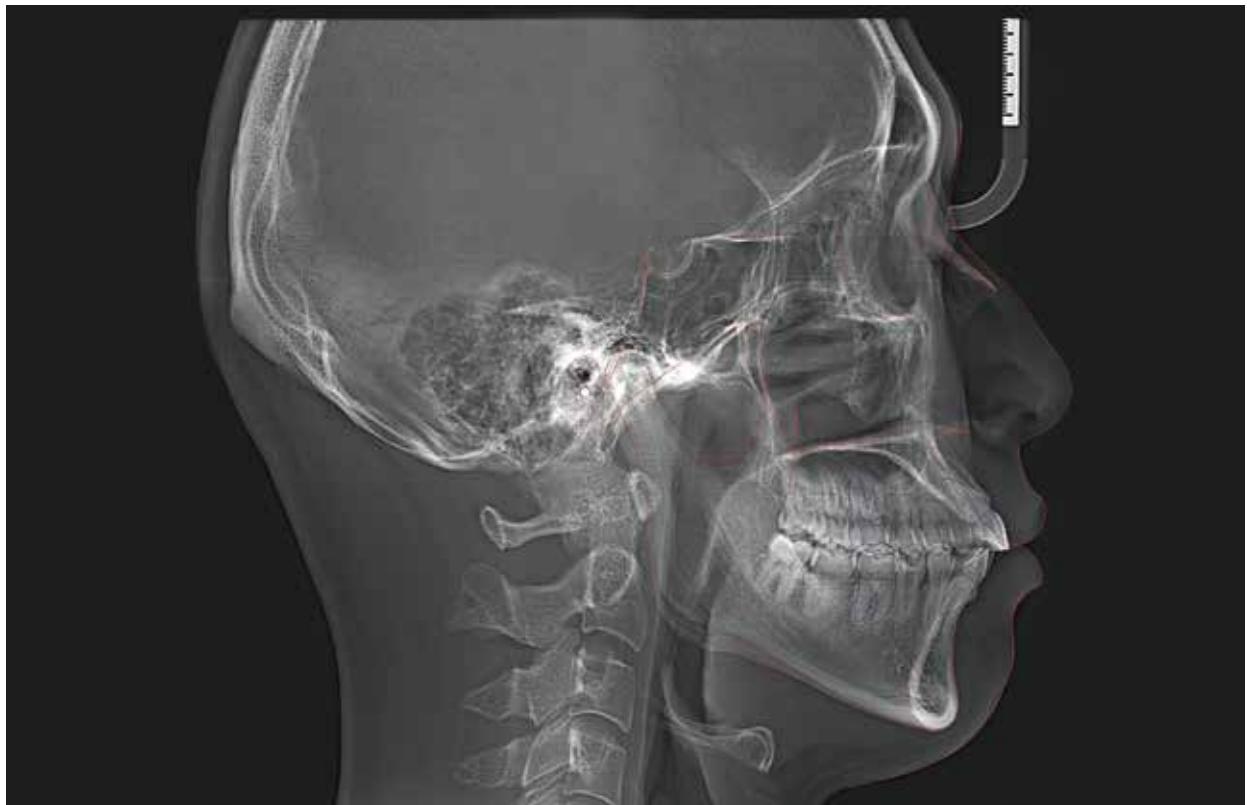

PA



SMV




扫描

## rainbow 3D Ceph


提供专门针对矫正治疗的解决方案。通过设定landmark可以快速进行分析及个性化操作。




Simple tracing功能

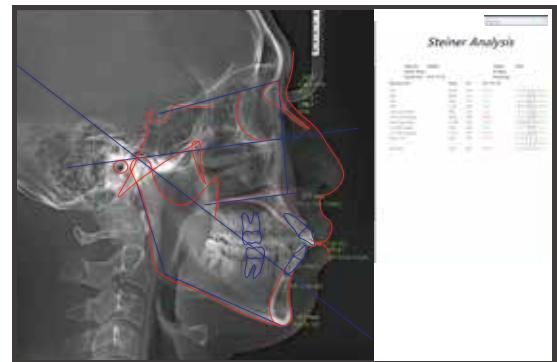

lateral分析

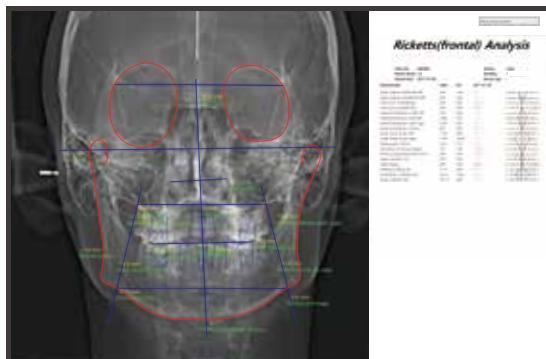

PA分析

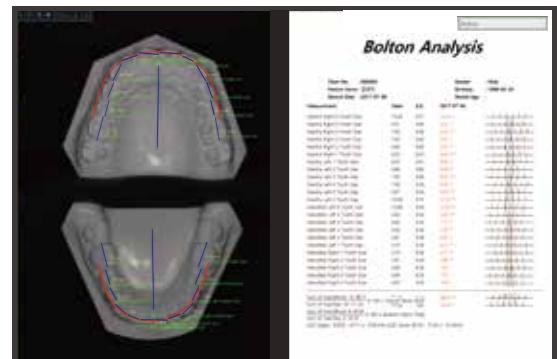

模型分析

## VTO/STO

提供颌面矫正手术及手术前后的模拟功能VTO/STO, 可直接呈现手术前后效果, 提高患者手术同意率。



术前



术后

# 技术参数

功 能	CBCT + Panorama + Cephalo Ceph : Scan Ceph
扫描时间(秒)	CT: 20, Panorama: 19, Cephalo: 19
视 野(cm)	5x5, 16x10, 16x18 (拼接)
焦点尺寸(mm)	0.5
传感器类型	CMOS
图像重建时间(sec)	≤80s
患者定位	立式/轮椅

# 规 格 (3合1)



**Dentium 登腾**  
For Dentists By Dentists

产品规格如有变更，恕不另行通知。  
本目录中产品可能未获得当地全部相关许可。如需详情，请咨询登腾员工当地业务人员。23.01 [Rev.1]

韩国 : 8F, 9F, 76, Changnyong-daero 256beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16229, Republic of Korea  
北京 : 顺义区林河大街22号院13号楼 (100102) T +86-10-8476-3053 F +86-10-8476-3053  
上海 : 浦东新区周浦镇芙蓉花路500弄16号楼 (201318) T +86-21-5878-6737 F +86-21-6215-5955  
广州 : 海珠区沥滘路368号广州之窗商务港10楼1001室 (510290) T +86-20-6232-5588 F +86-20-6232-5588

